

Unbeschwert schlafen auf Luftkissen



Freiheit... mit Zusatzfunktionen

- ⊕ **Q-Abdeckung** für eine leisere Anwendung
- ⊕ **Verschiedene Kopfbänder** für alle Größen
- ⊕ Noch immer eine **Maske in einer bequemen Größe** aus drei problemlos zu reinigenden Teilen


Genau das, was Sie wollten – eine noch leisere Nasalkissenmaske mit optionalem verstellbarem oder Stretchwise™-Kopfband. Dank dieses erweiterten Angebots, passend für mehrere Kopfgrößen, erleben Sie eine geräuschärmere Anwendung mit weniger Luftzuggeräuschen.

Die F&P Pilairo Q ist nicht nur eine unserer leichtesten CPAP-Nasalkissenmasken (55 Gramm),* sondern auch eine der leisesten und leistungsfähigsten für Patienten. Das intelligente Design ermöglicht sowohl die Integration der selbstaufblasenden AirPillow™-Dichtung als auch zweier verschiedener Kopfbänder, damit noch mehr Ihrer Patienten die Maske nutzen können. Bieten Sie Ihren Patienten Bewegungsfreiheit und Stabilität, der sie vertrauen können.

*F&P Pilairo Q mit Stretchwise-Kopfband



Die F&P Pilairo Q wurde entwickelt, um die Patientenzufriedenheit zu steigern. Die F&P Pilairo Q ist eine äußerst effektive Nasalkissenmaske aus drei Hauptkomponenten und zwei verschiedenen Kopfbändern, die mit dem Hauptaugenmerk auf Komfort, Dichtigkeit und leichte Handhabung entworfen wurde.

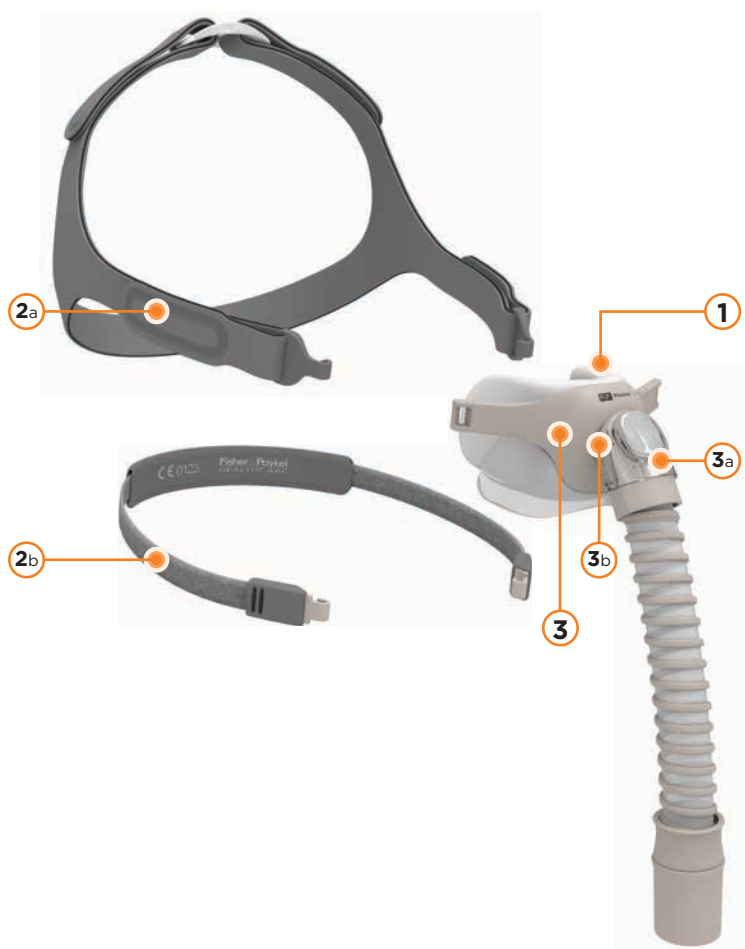

Drei Hauptkomponenten:

1. AirPillow-Dichtung

Die AirPillow-Dichtung verfügt über eine 3D-Kontur aus Silikon von variabler Stärke (VTS™) und verwendet CPAP-Druck zum Selbstaufblasen, um eine effektive, aber dennoch angenehme Doppeldichtung in und an der Nase zu schaffen. Die AirPillow-Dichtung lässt sich flexibel in jede Richtung bewegen, ohne Dichtigkeitsverlust.

2. Optionale Kopfbänder: Verstellbares oder Stretchwise-Kopfband

a. Verstellbares Kopfband

Das atmungsaktive, ergonomisch geformte Kopfband passt zu noch mehr Kopfgrößen und ermöglicht eine genaue und bequeme Anpassung der Größe an den Patienten.

b. Stretchwise-Kopfband – eine Alternative

Dieses minimalistische Kopfband aus einem weichen, elastischen, latexfreien Gewebe passt sich dem Träger automatisch an, um einen schnellen und einfachen Sitz zu ermöglichen.

3. Leichter Rahmen

Der Rahmen mit niedrigem Profil ist stabil, langlebig und klein und ermöglicht eine klare Sicht. Der Zufuhrschlauch ist leicht, äußerst flexibel und für minimalen Druck oder Zug auf dem Gesicht ausgelegt. Die Stabilisatoren sind das Tragegerüst für die AirPillow-Dichtung und sorgen für zusätzliche Stabilität.

a. Q-Abdeckung

Für eine geräuschärmere Verwendung¹ und minimale Luftzugeräusche.

b. Das Kugelgelenk

Es sorgt dank seiner Drehung für Bewegungsfreiheit und minimalen Zug durch den CPAP-Schlauch.

¹ Der Schalldruckpegel der Maske mit Q-Abdeckung beträgt 23,6 dBA, der Unsicherheitsfaktor 2,5 dBA.



Bestellnummern			
400421	F&P Pilairo Q – inklusive verstellbarem und Stretchwise-Kopfband	400HC565	F&P Pilairo Q-Nasalkissenmaske (ohne Kopfband)
400HC125	F&P AirPillow-Dichtung	400HC229	Winkelteilabdeckung und Luftverteiler für F&P Pilairo Q (10ER Pack)
400HC328	Verstellbares und Stretchwise-Kopfband für F&P Pilairo Q (Kombipaket) – nur in den USA	400HC326	Verstellbares F&P Pilairo Q-Kopfband – Außerhalb der USA
		400HC588	Clips und Schnalle für F&P Pilairo Q-Kopfband
		400HC224	Drehgelenk-Buchse
		400HC322	F&P Pilairo Q Stretchwise-Kopfband – Außerhalb der USA