



JOYCEeasy

... geniale Einfachheit.
Nasal oder Full Face. Einfach easy.

Einfacher geht's wirklich nicht: Alles an unseren Beatmungsmasken JOYCEeasy zielt auf eine kinderleichte Bedienung ab; so die einfache Maskeneinstellung direkt am Patienten und die intuitive Handhabung. Gleichzeitig sorgt JOYCEeasy sofort für mehr Therapie-Compliance, denn Leckagen und Druckstellen sind dank ihrer guten Passform auf ein Minimum reduziert. Das leise und diffuse Ausatemsystem sorgt zudem für eine ruhige Schlafzimmersphäre.

Geniale Einfachheit überall:

- Grenzenlose Bewegungsfreiheit dank des Kugelgelenks 1
- Leises und diffuses Ausatemsystem 2
- Mit einer Hand auf- und abzusetzen
- Farbcodierte Klettzungen 3
- Extrem robuster Kunststoff
- Reißleine (nur Full Face)


JOYCEeasy next FF



JOYCEeasy Full Face



JOYCEeasy nasal

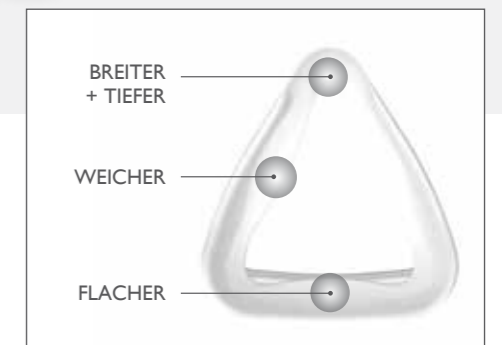

JOYCEeasy next FF JOYCEeasy Full Face

... das perfekte Duo.
Für jeden die richtige Passform.

Wir haben Ihnen zugehört.

Und JOYCEeasy Full Face entsprechend Ihren praktischen Bedürfnissen überarbeitet:


JOYCEeasy next FF mit rundum überarbeitetem, größerem Maskenwulst, der auch bei höheren Drücken komfortabel und stabil aufliegt.

Sowie einer Kopfbänderung, die ebenfalls druckstabil anliegt und deren Clip sich durch den richtigen Mix aus Materialien und ergonomischem Design leicht von der Maske lösen lässt.

Ihr Nutzen – Für jedes Gesicht die richtige Maske:

JOYCEeasy next FF = normal bis adipös

JOYCEeasy Full Face = schlank bis hager

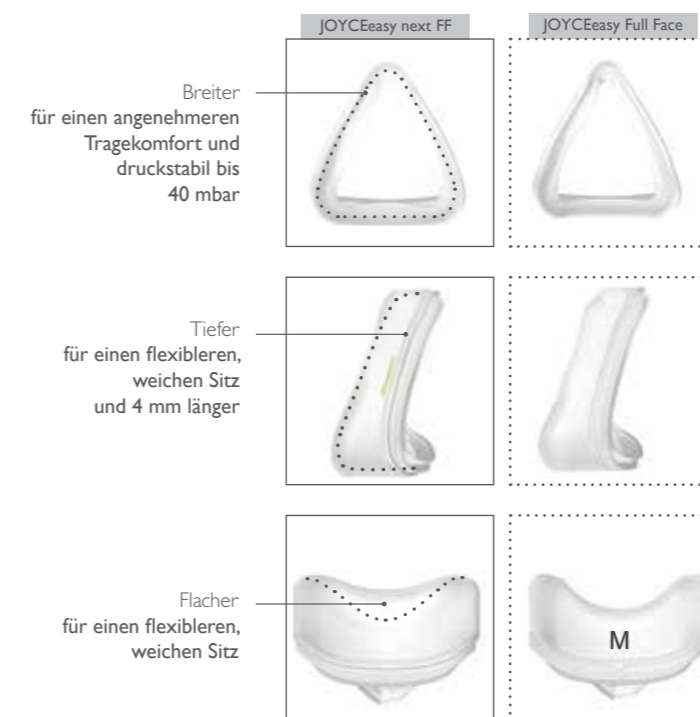

JOYCEeasy nasal

Auch die Nasalmaske wurde dank Ihrer Rückmeldungen weiter optimiert.

Ein breiter, weicher und tiefer Nasenrückenbereich lässt auch größere Nasen leicht und angenehm in den Wulst abtauchen. Durch einen flacheren und flexiblen Oberlippenbereich schmiegt sich die Maske noch sanfter an das Gesicht an.

Dank einer Vergrößerung des Maskenwulstes können von diesen Verbesserungen nun noch mehr Patienten profitieren.

Keine Sorge, der in der Größe unveränderte Wulst in Größe S passt auch weiterhin auf kleine Gesichter.

Zubehör

Set Kugelgelenk vented Nasal
Sicherungsring, Winkel, Drehhülse
WM 15798



Set Kugelgelenk Full Face vented (JOYCEeasy next FF)
Sicherungsring, Winkel, Drehhülse, Notfallausatemventil
WM 15944



Set Kugelgelenk Full Face vented (JOYCEeasy Full Face)
Sicherungsring, Winkel, Drehhülse, Notfallausatemventil
WM 15897



Reißleine
WM 26890 (Full Face)



Set Endoskopieadapter JOYCEeasy next FF NV / JOYCEeasy Full Face NV
Sicherungsring NV, Endoskopie-Winkel NV
WM 15864



Set Winkel JOYCEeasy next FF NV / JOYCEeasy Full Face NV
Sicherungsring NV, Winkel NV
WM 25269



Ersatzteile

WEINMANNStrap für JOYCEeasy nasal
inkl. Bänderungsclips
WM 25505



WEINMANNStrap für JOYCEeasy Full Face
inkl. Bänderungsclips
WM 25606




WEINMANNStrap für JOYCEeasy next FF
inkl. Bänderungsclips
WM 25105



Maskenwulst Silikon
Gr. S WM 26803 (Nasal)
WM 26853 (Full Face)
WM 25104 (next FF)
Gr. M WM 26813 (Nasal)
WM 26863 (Full Face)
WM 25114 (next FF)
Gr. L WM 26823 (Nasal)
WM 26873 (Full Face)
WM 25124 (next FF)



Stirnpolster Silikon
WM 26801 (Nasal und Full Face)



Produktbezeichnung	Gr. S	Gr. M	Gr. L	HMV-Pos.Nr.
JOYCEeasy Nasal	WM 25510	WM 25520	WM 25530	14.24.16.2045
JOYCEeasy Full Face	WM 25910	WM 25920	WM 25930	14.24.16.6039
JOYCEeasy next FF	WM 25109	WM 25119	WM 25129	14.24.16.6055
JOYCEeasy next FF NV	WM 25159	WM 25169	WM 25179	14.24.16.1026

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter loewensteinmedical.de

CE 0197



© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical Technology.



JOYCEeasy
Genial einfach. Einfach genial.

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40, 22525 Hamburg
Deutschland
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

