

Mirage FX: Eine für alle

Mirage FX – die neueste Nasenmaske von ResMed besticht durch ihren außerordentlich hohen Tragekomfort und ihre Passgenauigkeit. Sie werden sie nicht missen wollen.



Müheleose Anpassung

Zeit ist ein wertvolles Gut. Das Spring Air™-Maskenkissen und die flexible Stirnstütze der Mirage FX arbeiten so großartig zusammen, dass in Rekordzeit ein perfekter Maskensitz erreicht wird.

Die intuitive Anpassung spart Zeit und ermöglicht den perfekten Sitz der Maske bereits beim ersten Mal.

Einfache Lösung

Mit einer perfekten Mischung aus elegantem Design und einfacher Funktionalität vereint Mirage FX genau das, was Sie immer von uns gefordert haben: Leistung, einfache Bedienbarkeit und Qualität.

Mirage FX ist die extrem einfache Komplettlösung: Komfort, Benutzerfreundlichkeit und Qualität in einer Maske vereint.

Eine Maske für alle

Die Mirage FX passt nahezu allen Patienten gleich beim ersten Mal. Sie sparen somit wertvolle Zeit beim Aufsetzen und Anpassen. Durch die Kombination aus hervorragender Funktion, leckagefreiem Sitz und einfacher Handhabung trägt sich Mirage FX wie von selbst, für jedermann.


Mirage FX passt nahezu jedem Patienten gleich beim ersten Mal.

Mirage™ FX
NASENMASKE

RESMED

Eine für alle

Die Benutzerfreundlichkeit von Mirage FX schließt alle Bereiche mit ein: Mit nur vier Teilen ist der Umgang mit Mirage FX so einfach wie noch nie.

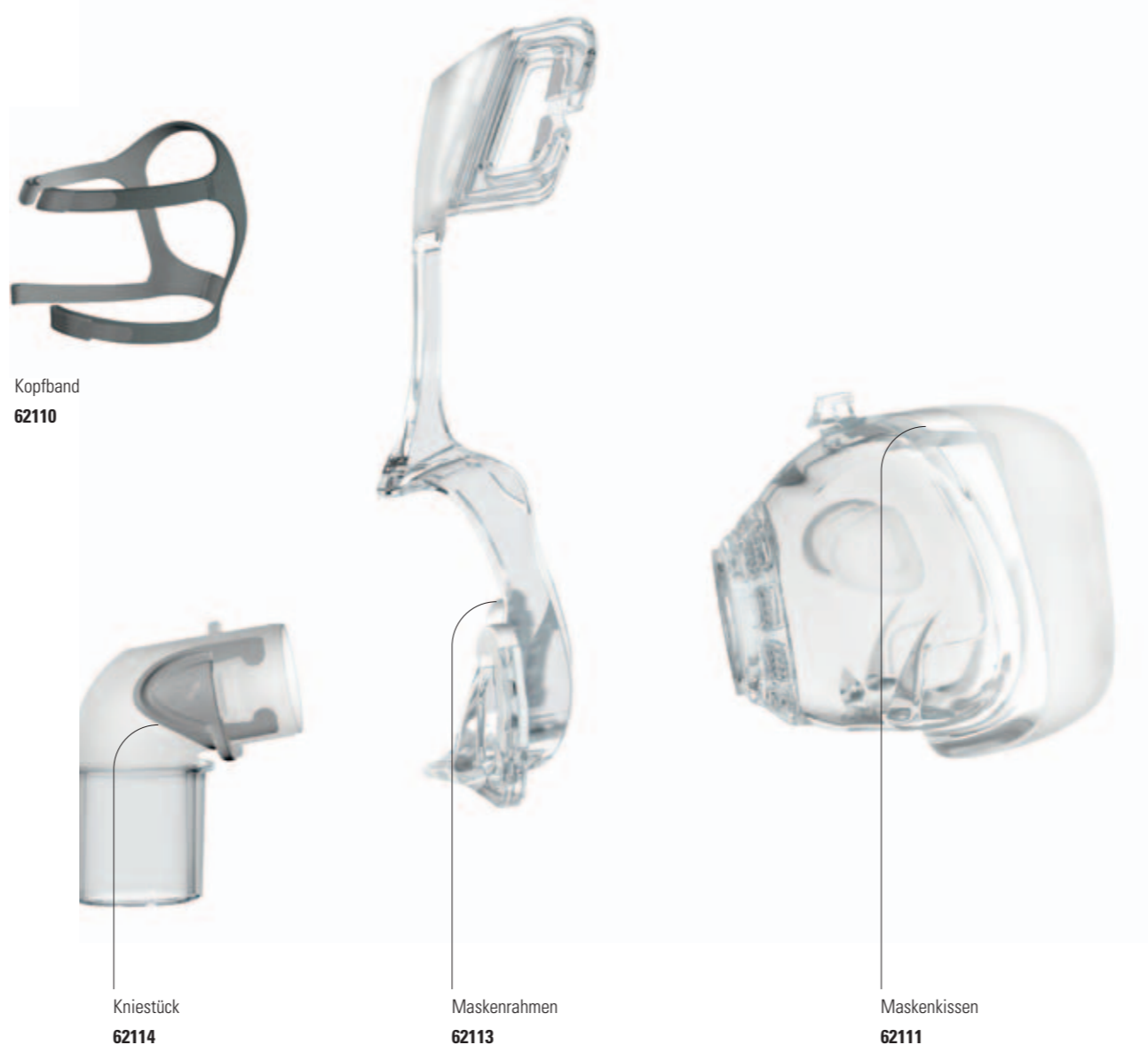

Artikelnummer

Mirage FX 62100

! Einzelheiten hierzu finden Sie in der **Gebrauchsanweisung der Mirage FX Nasenmaske.**

Vertrieb durch: ResMed GmbH & Co. KG - Fraunhoferstraße 16 · 82152 Martinsried · DEUTSCHLAND · Tel. 089 9901-00 · Fax 089 9901-1055 · E-Mail reception@resmed.de

Medizin · Technologie · Management www.resmed.de

RESMED

Müheles. **Wirksam.**



Mirage™ FX
NASENMASKE

© 2011 ResMed GmbH & Co. KG - Art.-Nr. 1014567 - 1 - 01.11

Die formschöne und dezente Mirage FX hilft dabei, die körperlichen und emotionalen Barrieren der Behandlungsakzeptanz zu bewältigen ... beginnend vom ersten Eindruck bis hin zur täglichen Verwendung.



Noch nie war die Behandlung so leicht wie mit Mirage FX

Vorteile für Sie...

Mirage FX erspart Ihnen eine mühsame Größenauswahl. Die Maske passt sich problemlos an fast alle Gesichtsformen an. Daher bietet Mirage FX die Lösung für nahezu alle Patienten.

Die Mirage FX kann ganz einfach angepasst und angelegt werden. Somit nimmt die Maskenanpassung praktisch keine Zeit in Anspruch. Da die Maske einschließlich Kopfband nur aus vier Teilen besteht, ist das Einweisen extrem einfach und Sie sparen ohne Qualitätsverlust wertvolle Zeit.

Mirage FX – Vorteile für Ihre alltägliche Arbeit

... und Ihre Patienten

Das Mirage FX Spring Air™-Maskenkissen sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung. Die weiche Polsterung, besonders im empfindlichen Nasenrückenbereich, erhöht eindrucksvoll den Tragekomfort.

Es wird Ihnen gefallen, wie unproblematisch Mirage FX ist: leicht anzupassen, zu tragen und zu reinigen ... Und als eine der leichtesten Nasenmasken im Markt wird sie Sie kaum belasten.

Mirage FX – Ihre Nummer 1


Neues formgerechtes Kopfband ist im Handumdrehen angepasst und tragebereit.



SoftTouch-Kopfband schützt das Gesicht und minimiert Druckstellen und Unbehagen.



Flexible Stirnstütze mit Flügeldesign bietet einen dynamischen Größen- und Anpassungsbereich.

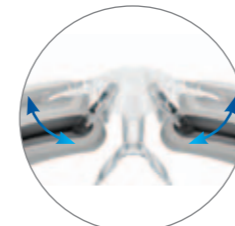


Leichter, robuster Rahmen ist stark genug, um die Maske auf dem Gesicht zu fixieren, und dabei weich genug, um Bewegungsfreiheit während des Schlafs zu gewährleisten.

Doppelwandiges Spring Air-Maskenkissen sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks. Um den empfindlichen Nasenrücken ist es besonders weich gepolstert.

Luftverteilende Ausatemöffnungen lassen die Luft sanft und leise vom Partner weg aus der Maske austreten.

Kopfbandschlaufen vereinfachen das Anlegen und Abnehmen des Kopfbandes und behalten optimale Kopfbandeinstellungen bei.

Kniestück mit Drucklasche vereinfacht das Anbringen und Abnehmen des Kniestücks am/vom Rahmen.

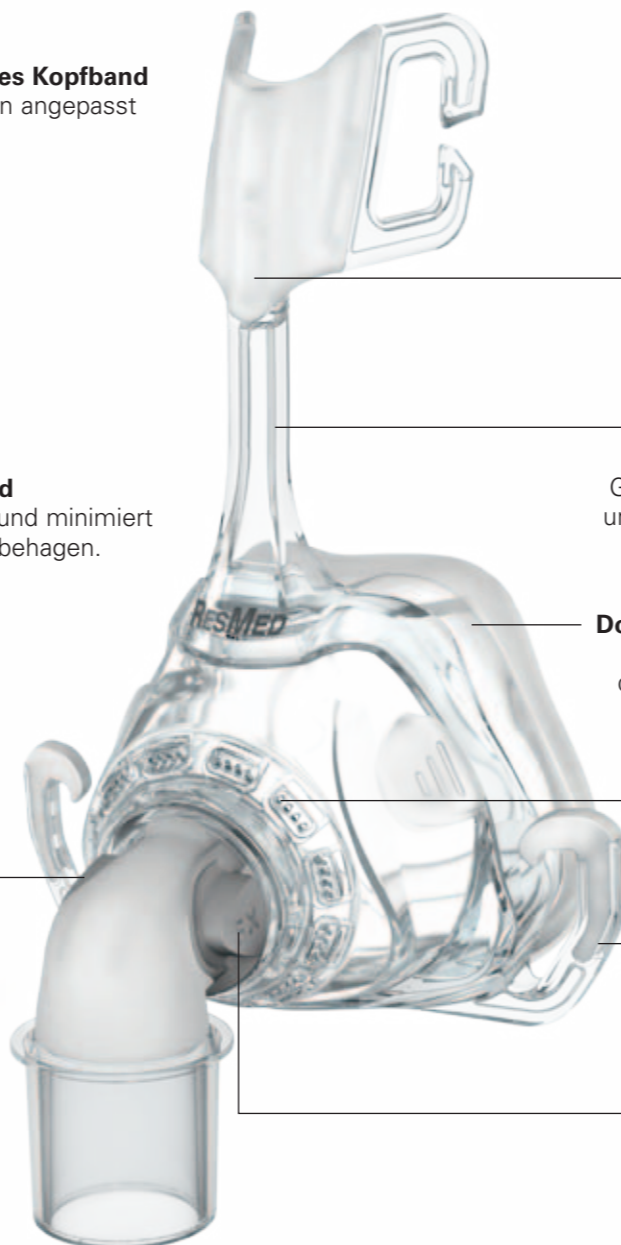

Anpassungsleitfaden



- Nehmen Sie vor dem Anlegen der Maske das Kniestück von der Maske ab, indem Sie auf die beiden seitlichen Laschen drücken.



- Verbinden Sie das Kniestück mit dem Atemschlauch des Gerätes.



- Halten Sie die Maske mit geöffneten unteren Kopfbändern an das Gesicht und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.



- Führen Sie nun die unteren Bänder unterhalb der Ohren entlang und schieben Sie sie über die Aufnahmen des Maskenrahmens.



- Öffnen Sie die oberen Klettverschlüsse und ziehen Sie die oberen Kopfbänder gleichmäßig an, bis sie bequem und sicher sitzen. Schließen Sie die Klettverschlüsse in der gewählten Position.



- Wiederholen Sie Schritt 5 mit den unteren Kopfbändern.



- Bringen Sie Kniestück und Atemschlauch an der Maske an, indem Sie auf die seitlichen Laschen drücken und das Kniestück in den Maskenrahmen stecken.
- Schalten Sie das Gerät ein.

Mirage™ FX
NASENMASKE